

Varioskan™ LUX

프리미엄 멀티모드 플레이트 리더

✓ Microplate 기반의 모든 광학 측정 가능

- 흡광, 형광 (Double Monochromator 200~1000nm)
- 발광, TRF, Alpha (업그레이드 가능)


✓ 다양한 분석, 안전 기능

- Automatic Dynamic Range selection
- 상시 자가 진단 및 자체보정
- 스마트 안전제어 기술 탑재로 Data 신뢰도 최강

Thermo 기술

✓ Application

- 핵산 및 단백질 정량
- Cell based assay, Enzyme kinetic
- Spectral Scanning
- FRET, BRET, TRF

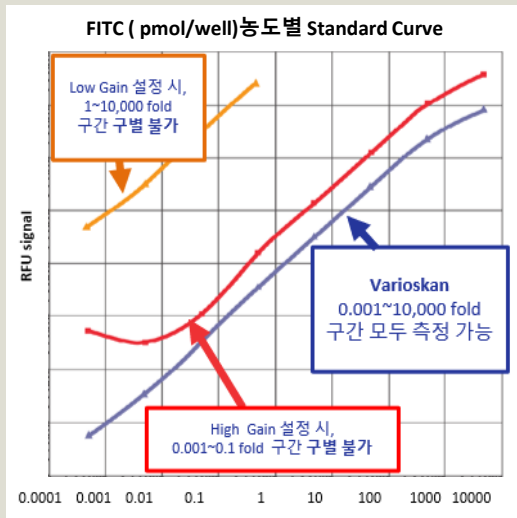

써모피셔의 Automatic Dynamic Range selection

- ✓ 자동 설정 및 One click 해제 가능
- ✓ High ~ Low 시그널 샘플을 한 번에 측정 가능
- ✓ Gain 최적화를 위한 반복 테스트, No
- ✓ 귀중한 샘플로 테스트 Run, No
- ✓ 높은 감도와 넓은 Dynamic Range 보장
- ✓ 사용자 간, 분석 간에 비교 가능한 결과 제공

Order information

Varioskan LUX Multimode Microplate Reader

- 흡광 형광 발광 Double Monochromator
- Bottom Read
- VLBL00D0



최대 40%
할인

Varioskan™ ALF

흡광/형광/발광 통합리더

✓ Microplate 기반의 흡광, 발광, 형광 측정 가능

- 흡광, 탁도 : Monochromator 200~1000nm
- 발광 : Normal & Filters, BRET assay 가능
- 형광 : Filter, Blue/Green/Orange 기본설치 외 5쌍 추가가능,
Ex/Em filter 교차 매칭 되며 , FRET assay 가능

✓ 다양한 분석

- Automatic Dynamic Range selection
- 상시 자가 진단 및 자체보정


Thermo 기술

✓ Application

- 핵산 및 단백질 정량
- Cell based assay, Enzyme kinetic
- Spectral Scanning
- FRET, BRET



데모 신청
환영

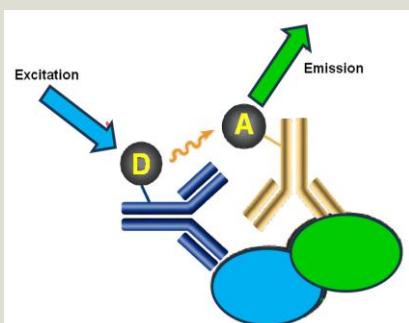

FRET : Target 물질 결합 반응 확인

- 물질 결합 : D 의 Em -> A 를 Ex 하여 Em 방출
- 물질 비결합 : D 의 Em 방출
- D 와 A 의 Em 시그널 비율로 결합도 확인

Model & Package

프로모션(KRW)

Varioskan ALF

- 흡광, 형광, 발광 마이크로플레이트 리더

23,000,000

Varioskan ALF

- 흡광, 형광, 발광 마이크로플레이트 리더
- uDrop Duo Plate

26,300,000



Find out more at thermofisher.com/platereaders

* 프로모션 가격은 구성에 따라 조정 될 수 있습니다. 부가세 별도

더 많은 ThermoFisher Microplate reader를 확인하고 싶으시다면 QR을 인식해보세요!
상담이 필요하실 경우 soyoung.kim@thermofisher.com , Junyeol.yoon@thermofisher.com 으로 문의 주시기 바랍니다.

thermo scientific

Multiskan™ SkyHigh

유연한 흡광 플레이트 스펙트로포토미터

✓ Monochromator 흡광, 탁도 200~1000nm 측정 가능

- 교반, 온도조절 : up to 45 °C
- 6~384 well plate, 뚜껑 열고/닫고 모두 Okay
- 핵산 및 단백질 정량, Cell based, Enzyme, Kinetic,
- Spectral Scanning 외 흡광을 이용한 측정 및 분석 지원

✓ Convenience features

- 자가 진단 및 자동 보정을 통한 Data 결과 보증
- 라이선스 무제한의 소프트웨어를 통해 자유롭게 Data 분석
- uDrop Duo Plate를 이용한 DNA, RNA 정량과 순도 측정을 간단하게 진행

데모 신청
환영



Model & Package

프로모션(KRW)

Multiskan Skyhigh

12,500,000

Multiskan Skyhigh & Touch Screen

• uDrop Duo Plate

17,000,000

* 프로모션 가격은 구성에 따라 조정 될 수 있습니다. 부가세 별도



Find out more at thermofisher.com/platereaders

더 많은 ThermoFisher Microplate reader를 확인하고 싶으시다면 QR을 인식해보세요!
상담이 필요하실 경우 soyoung.kim@thermofisher.com , Junyeol.yoon@thermofisher.com 으로 문의 주시기 바랍니다.

thermo scientific

ELISA Reader & Washer

효소 결합 면역흡착 분석법 연구자를 위한 washer 구성

Model & Package

Varioskan™ ALF + wash Versa



- 흡광 : 200~1000nm
- 형광 : Blue/Green/Orange
- 발광
- 6 ~ 96, 384well plate
- 2 x 8 wash head

Multiskan™ Skyhigh + wash Versa



- 흡광 : 200~1000nm
- 6 ~ 96, 384well plate
- 2 x 8 wash head

Multiskan™ FC + wash



- 흡광 : Filter based 가성비
- 405, 450, 630nm 외
- 96 well plate reading
- 1x8 wash head

프로모션(KRW)

32,000,000

22,000,000

13,500,000

* 프로모션 가격은 구성에 따라 조정 될 수 있습니다. 부가세 별도



Find out more at thermofisher.com/wellwash
thermofisher.com/elisa

더 많은 ThermoFisher Micoplate reader를 확인하고 싶으시다면 QR을 인식해보세요!
상담이 필요하실 경우 soyoung.kim@thermofisher.com , Junyeol.yoon@thermofisher.com 으로
문의 주시기 바랍니다.



thermo scientific